

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

MASÁŽNÍ PISTOLE S VÝMĚNNÝMI KONCOVKAMI

PŘEKLAD NÁVODU K OBSLUZE



KD3080 / KD3081 / KD3082


USCHOVEJTE TENTO NÁVOD K OBSLUZE

**Tento dokument obsahuje pokyny týkající se bezpečnosti a obsluhy a informace o záruce.
Dokument spolu s dokladem o koupi skladujte na suchém místě.**



SPECIFIKACE

1. Bezkartáčový motor s vysokým točivým momentem a technologií tichého klouzání
2. Odnímatelná baterie
3. Lithium-iontová baterie (více než 2 hodiny provozu na jedno nabití)
4. Více nastavení rychlosti pro optimální tlak
5. Bezdrátový a lehký (2,5 lb)
6. Spínač/vypínač napájení
7. Výměnné aplikátory

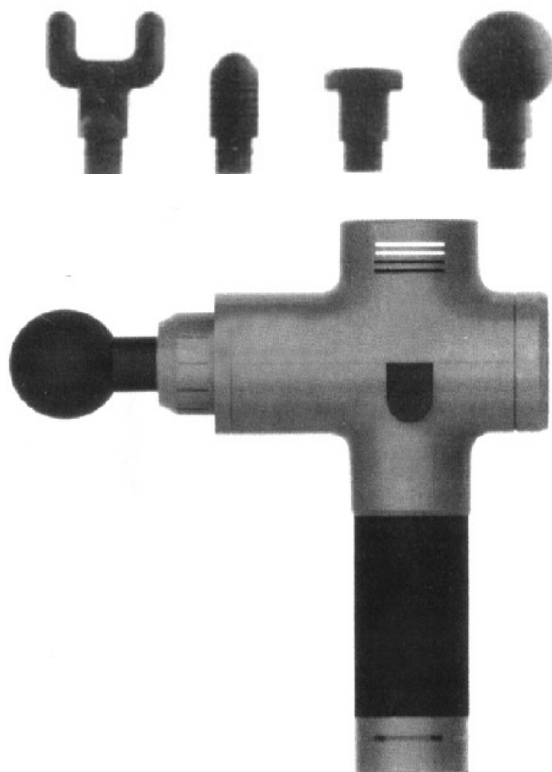

MODEL	TECHNICKÉ ÚDAJE
<p style="text-align: center;">KD3080</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 20 různých rychlostí • Výkon 250 W • Lithium-iontová baterie • Zdvih 12 mm • Doba nabíjení do 60 minut • Provozní doba až 6 hodin – v závislosti na síle přitlaku, rychlosti • Hlučnost 45-65 db • LCD displej • 6 výměnných koncovek + 2 zdarma: Tvar U, plochá, lopatková, kulatá, kulatá XL, tvar náboje, pneumatická koncovka, oblouková • Napájecí zdroj je součástí sady • Kufřík pro skladování
<p style="text-align: center;">KD3081</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 30 různých rychlostí • Výkon 125 W • Lithium-iontová baterie • Zdvih 12 mm • Doba nabíjení do 1-1,5 hodiny • Provozní doba až 6 hodin – v závislosti na síle přitlaku, rychlosti • Hlučnost 45 db • LCD displej • 9 výměnných hlavic: malá kulatá, lopatková, dvojitá, tvar náboje, zahřívací, vzduchová, plochá, bodová, půlměsíková
<p style="text-align: center;">KD3082</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 30 různých rychlostí • Výkon 125 W • Lithium-iontová baterie • Zdvih 12 mm • Doba nabíjení 1-1,5 hodiny • Provozní doba od 1 do 6 hodin – v závislosti na síle přitlaku, rychlosti • Hlučnost 45 db • LCD displej • 8 různých koncovek: tvaru U, plochá, lopatková, kulatá, korková, tvar náboje, pneumatická, oblouková

NABÍJENÍ

- Před prvním použitím po připojení nebo odpojení od zařízení baterii zcela nabijte po dobu maximálně šesti hodin.
- Chcete-li nabíjet, připojte stejnosměrnou koncovku dodaného 24 V napájecího zdroje k portu pro nabíjení baterie a připojte kabel na straně střídavého proudu do elektrické nástěnné zásuvky.
- LED pásek na kontrolkách baterie bliká a indikuje úroveň nabití baterie a aktivní nabíjení.
- Když je baterie připojena, LED diody na zařízení blikají, aby indikovaly úroveň nabití baterie a aktivní nabíjení.
- Plné nabití je signalizováno, když všechny LED diody přestanou blikat a zůstanou plně svítit.
- Baterii lze nabíjet po krátkou dobu a na nízkou úroveň nabití.
- Nedoporučuje se zcela vybit baterii na úroveň červené LED diody.
- Průměrná doba provozu je více než 2 hodiny v závislosti na úrovni rychlosti a tlaku vyvíjeného během používání.

OBSLUHA

- Zarovnejte a připevněte baterii k základně zařízení – ujistěte se, že je bezpečně zajištěna na svém místě.
- Zapněte zařízení přesunutím přepínače napájení na spodní straně baterie do polohy ON. Vypněte zařízení nastavením vypínače napájení do polohy OFF.
- Když je vypínač napájení v poloze ON, stiskněte jednou tlačítko napájení pro zapnutí zařízení na úroveň jedna, dvakrát pro zapnutí zařízení na úroveň dva a třikrát pro zapnutí úrovně tři. Dalším stisknutím tlačítka napájení se zařízení vypne. Modré LED diody budou indikovat příslušnou úroveň výkonu.
- Po vypnutí zařízení zcela zasuňte aplikátor stisknutím. Vyjměte, vytáhněte.
- Použijte na požadovanou část těla s požadovanou rychlostí, dle potřeby použijte tlak.
- Chcete-li baterii vyjmout, jemně palcem stiskněte tlačítko pro uvolnění baterie. Druhou rukou pevně zatlačte dolů na baterii/rukojeť.

ÚDRŽBA, ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

- K čištění zařízení použijte lehce navlhčený hadřík a poté jej osušte měkkým hadříkem.
- Před uskladněním nebo přepravou vyjměte baterii a uložte ji do dodané kartonové krabičky.

UPOZORNĚNÍ

VAROVÁNÍ A VÝSTRAHY

- Neponořujte do vody, chraňte před kapalinami nebo zdroji tepla. Udržujte ventilační otvory bez prachu a nečistot.
- Neodstraňujte šrouby ani se nepokoušejte zařízení demontovat.
- Nepoužívejte zařízení nepřetržitě déle než hodinu, před dalším použitím ponechte zařízení 30 minut v klidu.
- Po nabití nebo před použitím odpojte nabíječku od baterie zařízení.
- Pouze pro dospělé. Nepoužívejte v případě zranění. Před použitím tohoto výrobku se poraďte s lékařem.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

NEBEZPEČÍ: Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem, požáru a zranění. Tento výrobek musí být používán v souladu s níže uvedenými pokyny.

- Pouze pro dospělé.
- Používejte pouze na suchý, čistý povrch těla na oděv, lehce přitlačte a pohybujte po těle po dobu přibližně 60 sekund na dané oblasti.
- Hypervoltáž používejte pouze na měkké tkáně těla podle potřeby, aniž byste způsobovali bolest nebo nepohodlí. Nepoužívejte na uši, dlaň nebo kosti na těle.
- Používejte pouze takové aplikátory, které poskytují nejlepší požadovaný účinek.
- Modřiny se mohou objevit bez ohledu na nastavení ovládání nebo použitý tlak. Často kontrolujte ohrožené místa a okamžitě přestaňte při prvních známkách bolesti nebo nepohodlí.
- Udržujte prsty, vlasy nebo jiné části těla v dostatečné vzdálenosti od násady a zadní části aplikátoru, protože to může způsobit přiskřípnutí.
- Do ventilačních otvorů masážní pistole nekládejte žádné předměty.
- Neponořujte do vody a nedovolte, aby se voda dostala do ventilačních otvorů masážní pistole.
- Masážní pistoli neupusťte ani ji nemyjte.
- Nabíjejte pouze pomocí dodané nabíječky masážní pistole 26 V DC.
- Před každým použitím zařízení a baterii pečlivě zkontrolujte.
- S masážní pistolí nemanipulujte ani ji žádným způsobem neupravujte.
- Nikdy nenechávejte spuštěnou masážní pistoli nebo připojenou k nabíječce.

Pokud platí některá z následujících podmínek, nepoužívejte masážní pistoli nebo jiné vibrační zařízení bez předchozího souhlasu lékaře.

Těhotenství, cukrovka s komplikacemi, jako je neuropatie nebo poškození sítnice, opotřebení kardiostimulátorů, nedávná operace, epilepsie nebo migrény, vyřezlé ploténky, spondylolytická spondylolistéza nebo spondylóza, nedávno provedené kloubní náhrady nebo nitroděložní tělíska. Slabé osoby a děti by měly být při používání vibračního zařízení v doprovodu dospělé osoby. Tyto kontraindikace neznamenají, že nemůžete používat vibrační nebo cvičební zařízení, ale doporučujeme vám nejprve se poradit s lékařem.

Pokračuje výzkum účinků vibračních cvičení na specifické zdravotní poruchy. To pravděpodobně zkrátí seznam kontraindikací, jak je uvedeno výše. Praktické zkušenosti ukázaly, že v mnoha případech má integrace vibračních cvičení do reálného plánu poradní charakter. To by mělo být provedeno na doporučení a ve společnosti lékaře, specialisty nebo fyzioterapeuta.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Oprávněný zástupce výrobce: Foreintrade S. A.

Adresa oprávněného zástupce: JANÓWEK, UL. MODRZEWIOWA 54, 05-555 TARCZYN, POLSKO

PROHLAŠUJEME, ŽE VÝROBEK JE V SOULADU S EVROPSKÝMI NORMAMI

Název výrobku: Masážní pistole - sada

Model: KD3080 KD3081 KD3082

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky Směrnic ES:

1. 2014/30/EU EMC Directive
2. 2011/65/EU ROHS 2 Directive
3. 2000/14/ES Noise Emission Directive

Podle norem:

EN 55014-1:2017/A11:2020, EN 55014-2:2015; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019

Certifikát s číslem PTC210511300701E-EM01 vydaný společností Precise Testing & Certification Guangdong Co., Ltd. (Building 1, no. 6, Tongxin Road, Dongcheng Street, Dongguan, Guangdong, Čína) ze dne 26. května 2021.

Osoba zodpovědná za přípravu technické dokumentace:

Ma Dong Hui; JANÓWEK, UL.MODRZEWIOWA 54, 05-555 TARCZYN, POLSKO.

Ma Dong Hui, TARCZYN, POLSKO, 16. 6. 2023